

# ディスクスの吸入手順 I

アドエア100ディスクス  
アドエア250ディスクス  
アドエア500ディスクス



フルタイド50ディスクス  
フルタイド100ディスクス  
フルタイド200ディスクス



セレベント50ディスクス  
セレベント100ディスクス  
セレベント200ディスクス



## 未使用の吸入器を初めて使用するときの準備

- ・吸入操作練習用具でホイッスル音→確認(はい、いいえ)
- ・吸入器を水平にして操作しています→確認(はい、いいえ)

☆初めて使用の吸入器の準備 →確認(はい、いいえ)

# ディスクスの吸入手順Ⅱ



カチッ!

その1;吸入の準備	確認
①カバーの音がするまで開ける	
②セットは音を確認するまでレバーを押す。 (カチッと音がするまで押します)	


吸入口から離して!



その2;吸入操作	確認
③吸入器を水平に持つ	
④吸入前に息を軽く吐く	
⑤ <b>力強く深く吸入する</b> (この際心配であれば④⑤の操作を繰り返す)	
④5秒程度の息止め	
⑤ゆっくり息を吐く(口もしくは鼻)	

吸入口をしっかり加えて力強く深く!

ガラガラとクチュクチュウがいを

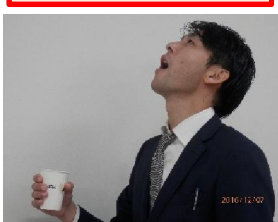

その3;吸入後	確認
⑥うがいまたはくちすすぎを行う。	
⑦スライド式カバーを閉める	

コメント欄

薬局名

薬剤師名